

© ORGAKOM 2017

iMANV mSTaRT



Installations-Info

Version 4.0

Installations-Info

Übersicht

- 1. Allgemeines**
- 2. FileMaker Go 16 Installation**
- 3. Wichtige Einstellungen setzen**
- 4. Download der iMANV-mSTaRT-App**
- 5. Lizenzierung der App**
- 6. Benutzerhandbuch**
- 7. Kontakt + Service**

1 Allgemeines

die Anleitung beschreibt die Installation der iMANV-mSTaRT-App für das iPhone.

Basis der App ist die FileMaker Go 16 Datenbank die viele Funktionen des iPhones für die Nutzung in der App erschließt und außerdem einen universellen Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Geräten und Betriebssystemen ermöglicht.

Für den Einsatz mit dem Betriebssystem Apple iOS 10 (oder neuer) steht FileMaker Go 16 kostenfrei zur Verfügung.

Für den Einsatz in anderen Betriebssystemen (z.B. Windows 10) muss eine kostenpflichtige Datenbanklizenz erworben werden.

Nachstehend wird die Installation von FileMaker Go 16 auf dem Apple Betriebssystem iOS beschrieben.

Wenn Sie bereits FileMaker Go 16 auf Ihrem Gerät installiert haben, springen Sie gleich zur Seite 11

2. FileMaker Go Installation

Wenn Sie auf Ihrem Gerät bereits FileMaker Go 15 oder älter verwenden, sollten Sie die dort installierten Dateien auf einem externen Medium sichern um sie dann später wieder auf Ihrem Gerät installieren zu können.

Wenn dies erfolgt ist, löschen Sie die alte FileMaker Installation komplett von Ihrem Gerät und installieren wie nachfolgend beschrieben FileMaker Go 16 auf Ihrem iPhone.

Nur wenn Sie FileMaker Go 15 oder älter auf Ihrem iPhone installiert haben,

sonst gehen Sie gleich zur nächsten Seite.

Zum Löschen der FileMaker Installation auf das „x“ Zeichen tippen.




Download von FileMaker Go 16 aus dem App Store




Starten Sie auf Ihrem iPhone jetzt den App Store

Im Suchfeld nach FileMaker suchen

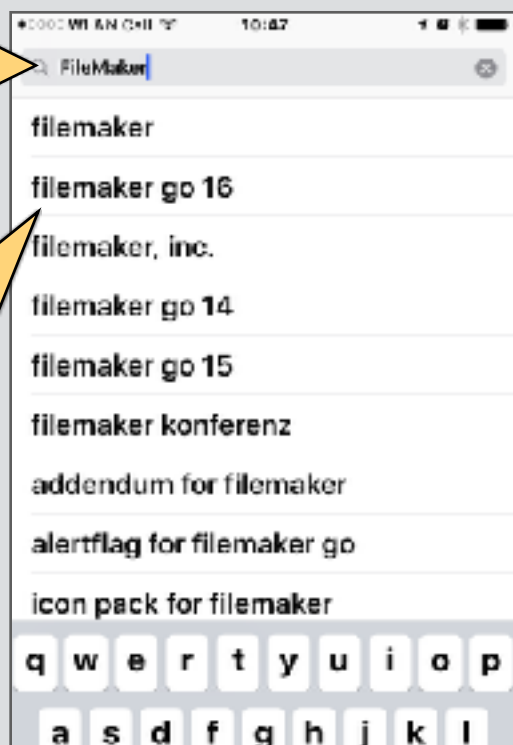

FileMaker go 16 auswählen

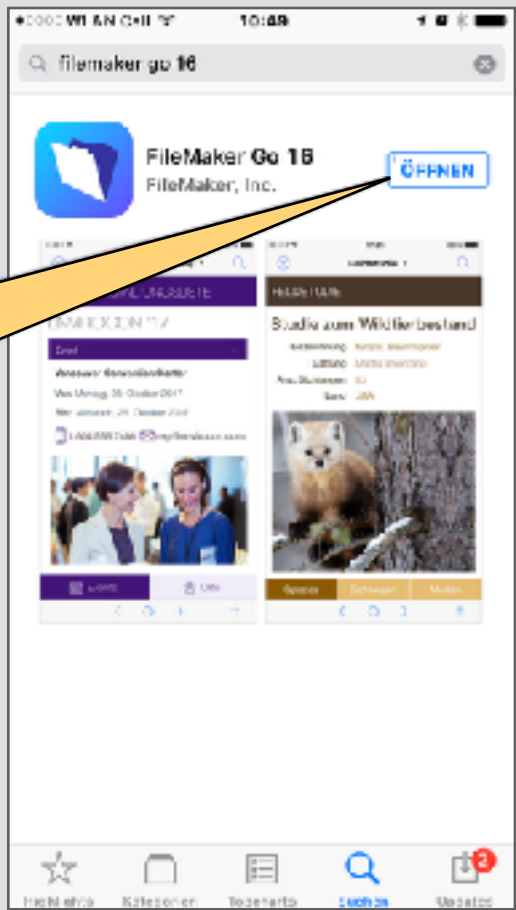


Laden und Öffnen
der App FileMaker
Go 16

Die FileMaker App installiert nun auf Ihrem iPhone das **Startzentrum** (quasi ein **Ordner**) in dem alle FileMaker Dateien gespeichert werden.

FileMaker Dateien müssen in diesem Startzentrum (Ordner) abgelegt sein, damit Sie aufgerufen werden können.

Die Funktionen des Startzentrums werden wir nachstehend noch näher erläutern.

Wenn sich FileMaker nach der Installation nicht selbst öffnet, dann starten Sie die App durch Antippen auf Ihrem iPhone.

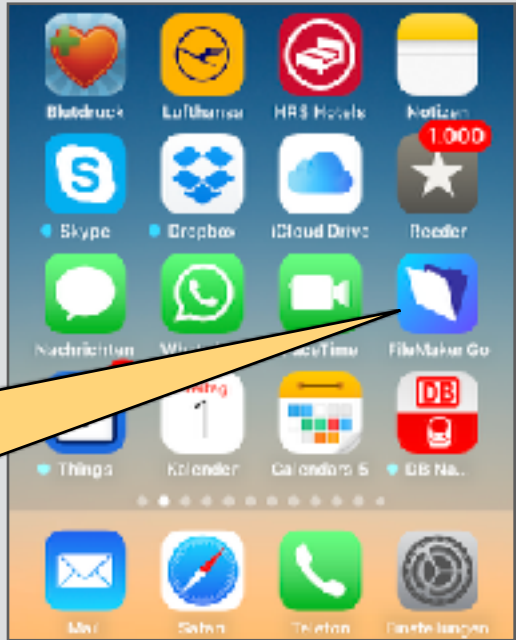

Auf Ihrem iPhone sollte jetzt die App FileMaker Go angelegt sein

Beim ersten Start von FileMaker haben Sie zunächst die Möglichkeit eine FileMaker Produktinfo anzusehen. Sie können dies aber auch Tippen auf „Schließen“ abbrechen.




Hier sehen Sie nun das FileMaker (FM) Startzentrum.

Darin werden alle FileMaker-Dateien angezeigt.

Die Anzeige können sie umschalten in Symbol- oder in Listenansicht.

Hier schalten Sie um zwischen Anzeige der zuletzt geöffneten Dateien, Anzeige der auf dem Gerät insgesamt abgesicherten FM-Dateien und Dateien die auf einem Server gespeichert sind.



Verwenden Sie im Normalbetrieb immer die Auswahl „Gerät“ zur Anzeige aller auf dem iPhone gespeicherten FileMaker-Dateien.

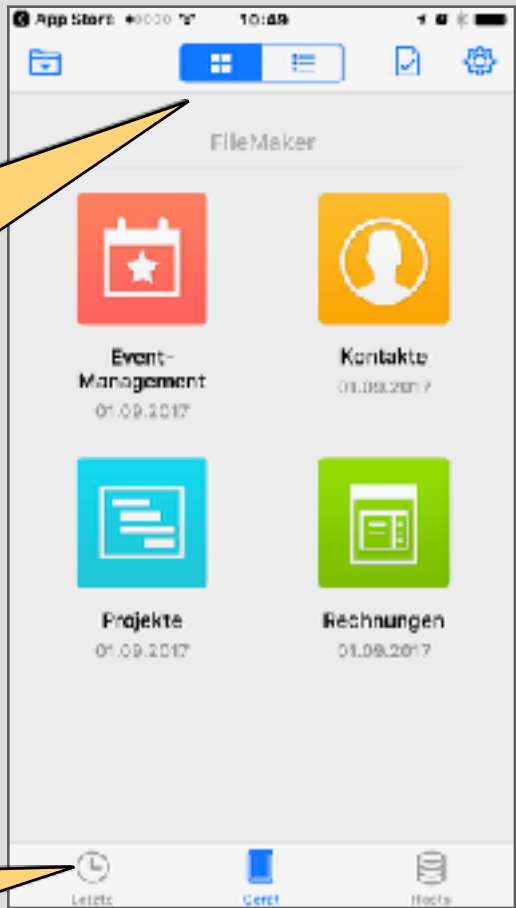

Hier die
Startzentrale in
Listenansicht.

Mit der Installation
von FileMaker
werden 4 Beispiel-
Dateien installiert.

Diese sind für den
Betrieb der iMANV
mStARt App nicht
erforderlich und
können gelöscht
werden.

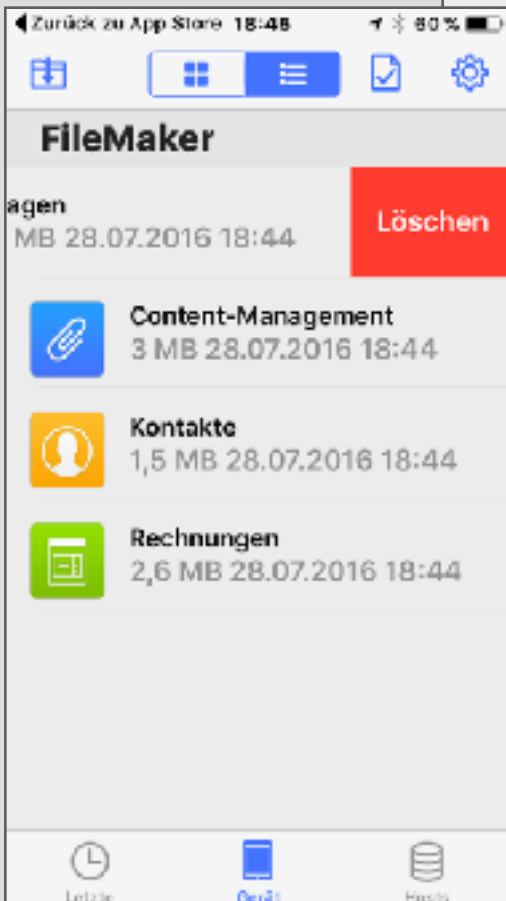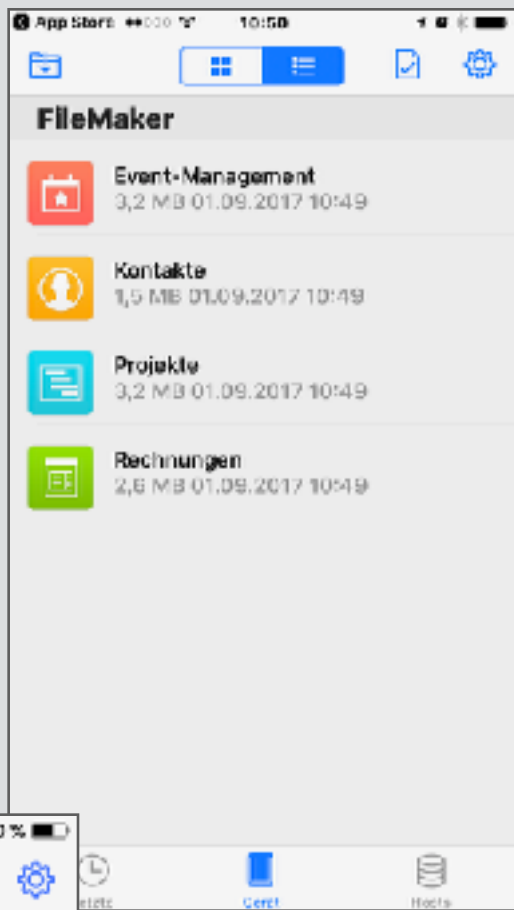

Zum Löschen der
Dateien auf dem
iPhone von rechts
nach links streichen
und dann auf
„Löschen“ tippen.

Sie können Ihre FileMaker Go Datenbanklizenz hier gleich registrieren, ist empfehlenswert aber nicht zwingend erforderlich.

FileMaker Go registrieren

Halten Sie sich über die aktuellen News und Tipps zu Produkten auf dem Laufenden. Um sich später zu registrieren, tippen Sie auf das Zahnradsymbol in der Startzentrale.

Registrieren

Nein, danke

Für den Betrieb der iMANV mSTART-App ist der Zugriff auf die GPS Standortdaten unbedingt erforderlich

Darf „FileMaker Go“ auf Ihren Standort zugreifen, wenn Sie die App benutzen?

FileMaker Go verwendet Ihren aktuellen Standort für Aufgaben mit geografischen Berechnungen.

Nein

Erlauben

letzten 3 Monate zum ersten Mal genutzt?
Ja/Nein

Ja

Nein

Fertig

3. Download von iMANV mSTaRT

Nun können Sie die iMANV mSTaRT-App auf Ihr iPhone downloaden. Dazu sollten Sie diese Installationsanleitung auf Ihrem iPhone verfügbar und geöffnet haben. Außerdem muss Ihr iPhone für den Download mit dem Internet verbunden sein.

Die App passt sich automatisch der jeweiligen Bildschirmgröße Ihres iPhones an und passt von iPhone 4s bis zu iPhone 7plus und natürlich auch für das iPhone SE.

**Download für iPhone
ab Version 4s oder neuer**

Nach dem erfolgreichen Download erscheint dieses Bild auf Ihrem iPhone.

Tippen Sie jetzt auf „Öffnen in...“

Die Anzeige kann je nach Version des Betriebssystems und des iPhones etwas unterschiedlich sein.

...oder auch dieses Bild auf dem iPhone. Wählen Sie stets „in FileMaker Go öffnen“ aus.




**Es öffnet sich jetzt auf Ihrem iPhone
dieses Fenster**

**Tragen Sie als
Kontoname „imany“
ein.**

**Tragen Sie als
Passwort ebenfalls
„imany“ ein.**

**Aktivieren Sie den
Schiebeschalter „Im
Schlüsselbund
speichern“, damit
das Passwort auf
Ihrem iPhone
gespeichert wird.**

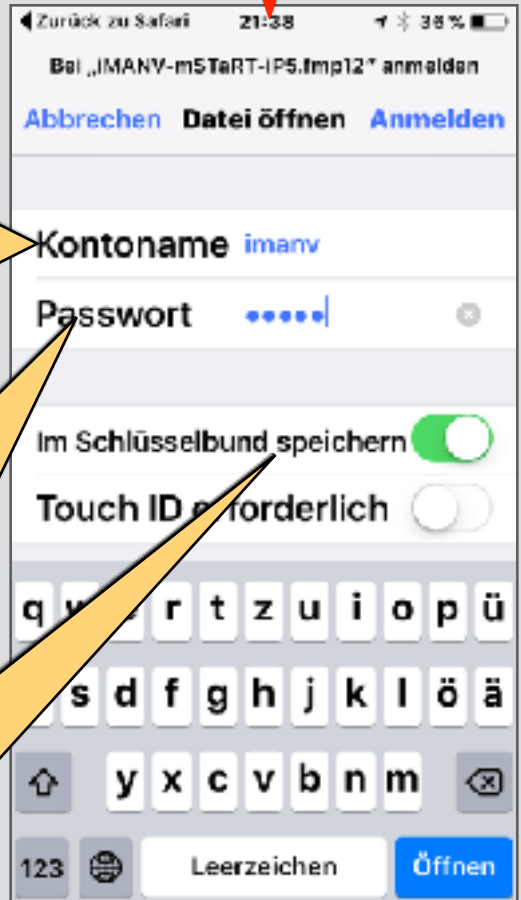

**Kontoname und
Passwort alles klein
geschrieben**

**So sichern Sie die Daten in der
iMANV mStArT-App
gegen unberechtigte Zugriffe ab**

**Wenn Sie zusätzlich
den Schiebeschalter
„Touch ID
erforderlich“
aktivieren, dann
müssen Sie sich bei
jedem Start der App
über den Fingerab-
drucksensor
identifizieren.**

Zurück zu Safari 21:38 38%

Bei „iMANV-mStArT-IP5.fmp12“ anmelden

Abbrechen Datei öffnen Anmelden

Kontoname imanv

Passwort

Im Schlüsselbund speichern

Touch ID erforderlich

q w e r t z u i o p ü
a s d f g h j k l ö ä
y x c v b n m
123 Leerzeichen Öffnen

Bitte bedenken Sie, dass Sie u.U. sensible Personendaten der Patienten in der App eingetragen haben. Deshalb sollten Sie schon sicherstellen, dass keine unberechtigten Dritte Zugang zu Ihrem iPhone haben.

Optional zu installieren:

Zusätzlich können Sie die Datei „iMANV-Download.pdf“ auf Ihrem iPhone in iBooks oder einer PDF-Reader-App installieren. Damit können Sie zukünftig einfach Update der iMANV-mSTaRT-App auf Ihr iPhone downloaden.


iMANV-Download.pdf


Der Download der Datei „iMANV-Key“ in das FileMaker Startzentrum, erspart Ihnen bei zukünftigen Updates das lästige eingeben der Registrierungsdaten.

iMANV-Key (Schlüsseldatei)

4. Lizenzierung der App


Die iMANV mSTaRT-App wird Ihnen von ORGAKOM zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie müssen allerdings hierzu die Nutzungsrechte ausdrücklich anerkennen. Diese werden Ihnen auf Ihrem iPhone nach der Eingabe der auf vorangegangener Seite beschriebenen Zugangsdaten angezeigt.

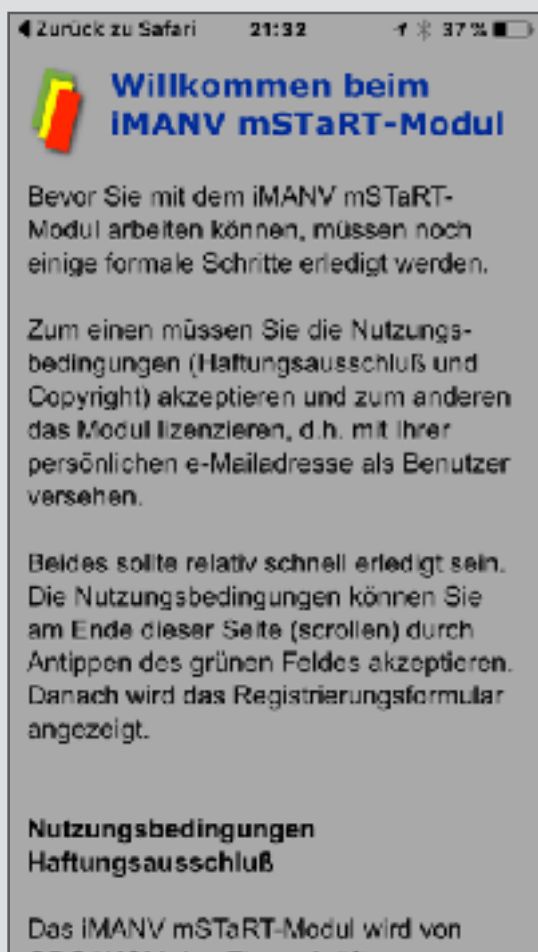

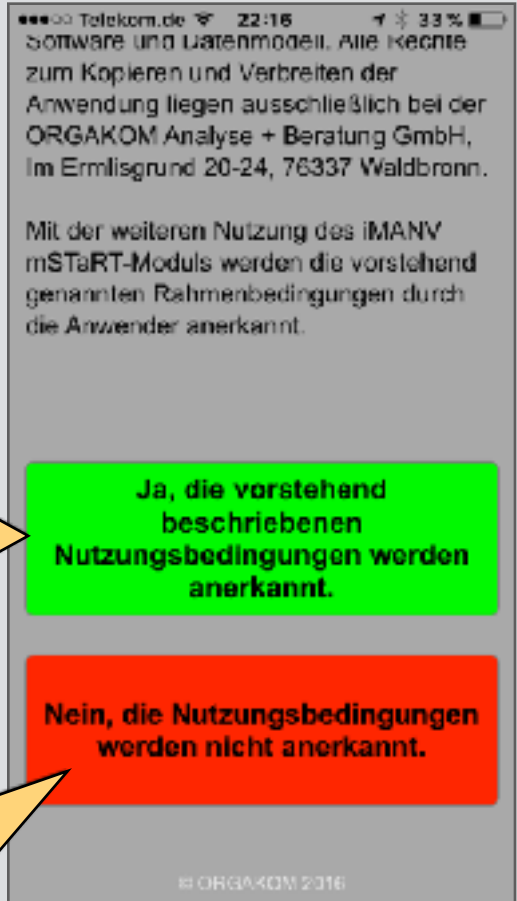

Bestätigen Sie die Anerkennung der Nutzungsbedingungen durch Antippen des entsprechenden Tastenfeldes.

Eine Ablehnung beendet die App und Sie können die App nicht nutzen.

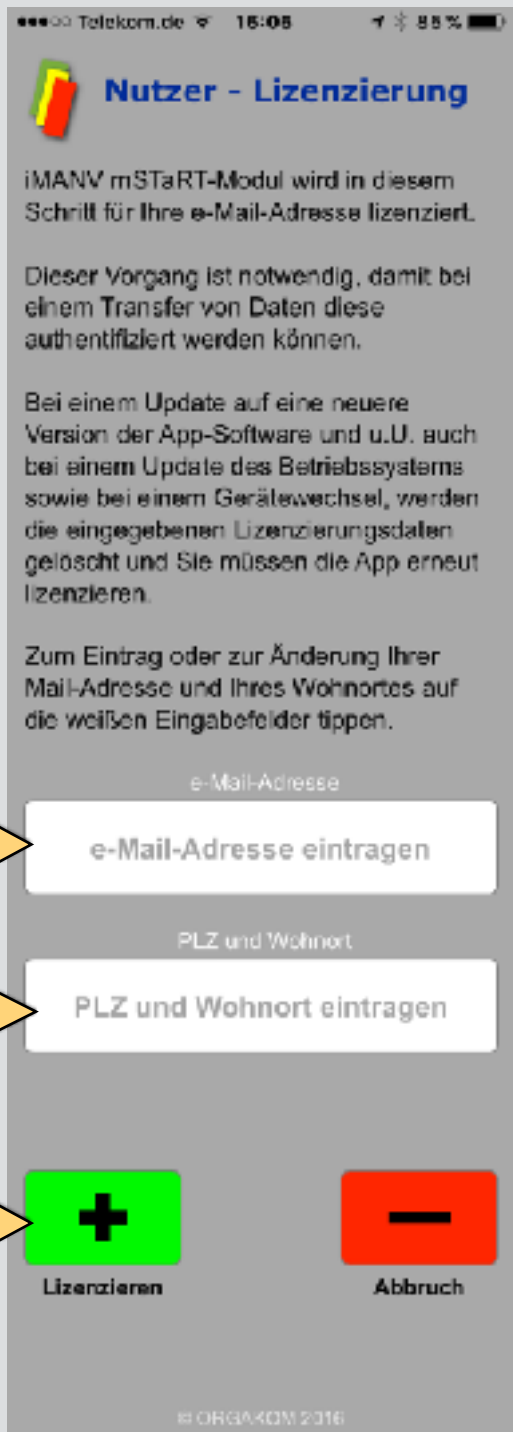

Zur Registrierung tragen Sie hier Ihre e-Mail-Adresse ein

Hier Ihren Wohnort (PLZ + Ort) eintragen

Tippen Sie zur Lizenzierung auf diese Taste

Geben Sie hier noch Ihr persönliches Kürzel ein, um gesichtete Patienten mit einer eindeutigen Kennzeichnungscode versehen zu können. Ansonsten verwendet das System einen automatisch generierten Code.

Telekom.de 22:18 32%

Systeminformation

Vorkenner für die Patienten
Registrierungsnummer
(Namenskürzel z.B. KAJH)

OK

Ich Die Das

Q W E R T Z U I O P Ü
A S D F G H J K L Ö Ä
↑ Y X C V B N M ↵
123 🌐 🗣 Leerzeichen Öffnen

Die auf Verletzten-Anhänge-Karten (VAK) vorgesehenen Patienten-Registrierungsnummern können bei der Sichtung manuell in die App eingetragen oder auch über Barcode eingescannt werden. Solange aber keine Nummer eingetragen ist, weist das System einen eigenen Code zu, der eine für Ihr iPhone individuell festlegbare Kennung vorangestellt wird. Diesen Code mit max. 5 Zeichen können Sie hier editieren.

5. Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Das iMANV mSTaRT-Modul ist auf Ihrem iPhone installiert und betriebsbereit.

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Dieses können Sie in der App aufrufen im Hauptmenu und dort auf Taste Hinweise + Informationen tippen, dann die Taste Benutzerhandbuch auswählen.



Das Handbuch wird dann vom Server geladen und kann durch Tippen auf die Anzeigefläche in der Mitte und danach auf den Button „Anzeigen“ bildschirmfüllend angezeigt werden.

6. Kontakt + Service

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

ORGAKOM Analyse + Beratung GmbH
Im Ermlisgrund 20-24
76337 Waldbronn

Telefon: +49 7243 5646-0

e-mail: imanv-support@Orgakom.biz

Internet: <http://www.orgakom.biz>

Hier noch direkte Links zu ORGAKOM:

ORGAKOM Software-Solution

ORGAKOM Analyse + Beratung

ORGAKOM FührungsAkademie